

Till dig som har fått Rekovelle® förskrivet av läkare


Denna patientvägledning innehåller information om Rekovelle förfylld penna och med stegvisa instruktioner guidas du genom förberedelser och korrekt hantering.

Om du har några frågor gällande användningen av Rekovelle, kontakta din läkare eller sjuksköterska.

Innan den första injektionen kommer du få instruktioner av din vårdpersonal kring hur du förbereder och injicerar med Rekovelle förfylld penna.

Läs noga igenom bipacksedeln i Rekovelle förpackningen innan du börjar använda Rekovelle förfylld penna.

småmirakel.se

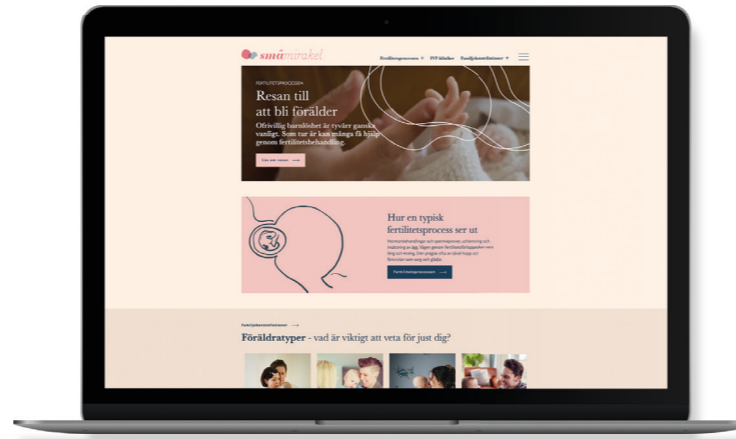

En sajt om resan till att bli förälder

Väntan på ett litet mirakel kan vara lång och känslös. Under en fertilitetsbehandling kan man dessutom behöva lära sig mycket nytt. På småmirakel.se guidar vi dig genom fertilitetsprocessen med fakta, artiklar och information.

REKOVELLE® 12 mikrog/0,36 ml, 36 mikrog/1,08 ml, 72 mikrog/2,16 ml (follitropin delta), injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Rekovelle används för behandling av kvinnor som har svårt att bli gravida eller som genomgår assisterad befruktning. Rekovelle stimulerar äggstockarna att växa och utveckla flera äggblåsor (folliklar). Innan behandling påbörjas, bör en fertilitetsutredning göras och eventuella kontraindikationer mot graviditet utredas. Rekovelle ska inte användas av kvinnor med tumörer i livmoder, äggstockar, bröst, hypofysen eller hypotalamus, gynekologiska blödningar utan känd orsak, förstörade äggstockar eller cystor på äggstockarna eller vid graviditet och amning. Behandlingen kan orsaka överstimulering av äggstockarna (ovariellt hyperstimuleringsyndrom (OHSS)). Kontakta läkare om vid smärta, obehag eller svullnad i magen, illamående, kräkningar, diarre eller viktuppgång eller andningsproblem. Behandlingen med Rekovelle kan medföra en ökad risk för att få blodproppar, särskilt vid övervikt eller om någon i familjen har blodproppssjukdom. Läs bipacksedeln noggrant före användning, denna finns även på www.fass.se. Läkemedlet är receptbelagt. Rådfråga alltid läkare innan läkemedlet används. ATC kod: G03GA10 Rx, (F) Rekovelle subventioneras inte vid äggfrysning av sociala skäl. SPC uppdaterad (2023-07-20). Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 MALMÖ, Tfn: 040-6916900, www.ferring.se



Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö.
Tel: 040-691 69 00, www.ferring.se


FERRING
PHARMACEUTICALS



Rekovelle®
follitropin delta

Förvaring och rengöring


- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
- Används före utgångsdatum som anges på etiketten på den förfyllda pennan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas.
- Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
- Rekovelle kan tas ut ur kylskåpet, utan att kylas igen, och förvaras vid högst 25 °C i upp till 3 månader inklusive perioden efter första injektionen. Därefter måste den kasseras.
- Efter första injektionen: 28 dagar vid förvaring vid högst 25 °C.
- När behandlingen avslutats måste all oanvänd lösning kasseras.
- Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

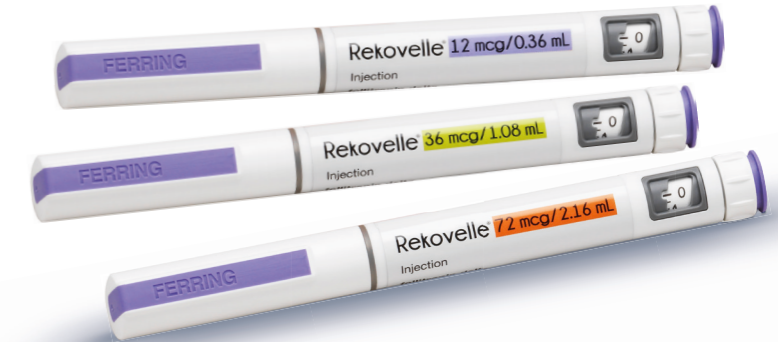

PATIENTVÄGLEDNING

Rekovelle® injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Rekovellev[®] förfylld penna – de olika delarna

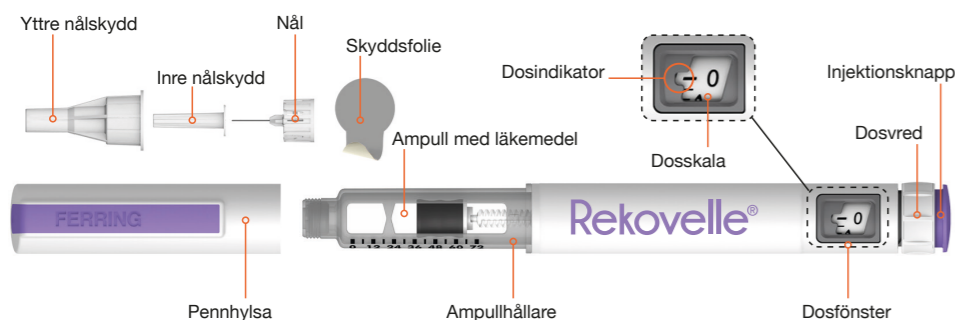

Rekovellev förfylld penna är en penna med dosskala, som kan användas för att ge mer än 1 dos Rekovellev.

Rekovellev förfylld penna finns med tre olika antal mikrogram:

- 12 mikrogram/0,36 ml
- 36 mikrogram/1,08 ml
- 72 mikrogram/2,16 ml

Pennan kan ställas in för att ge doser från 0,33 mikrogram till 20 mikrogram Rekovellev i markerade steg om 0,33 mikrogram.

Rekovellev förfylld pennan ska endast användas efter att du instruerats av din vårdpersonal.



Instruktionsfilm för Rekovellev förfylld penna kan du se på denna hemsida (eller genom att skanna QR-koden).

www.medicininstruktioner.se/ferring/rekovellev



Stegvisa instruktioner om hur du använder Rekovellev[®] förfylld penna

Tvätta händerna med tvål och vatten innan du använder Rekovellev förfylld penna.

1) Sätt på nålen



Dra av locket och dra bort skyddsfolien från nålen. Klicka fast nålen så att den sitter fast ordentligt. Använd alltid en ny nål vid varje injektion.

3) Förberedelse



Vrid dosvredet medurs tills en dropp-symbol visas bredvid dosindikatorn. Håll pennan med nålen riktad uppåt. Knacka lätt med fingret på ampullen så att eventuella luftbubblor i ampullen stiger till toppen. **Avlägsna bara luftbubblor första gången du använder pennan. Så om pennan redan har använts – fortsätt direkt till "Ställ in dosen" på nästa sida.**

2)



Dra av det yttre nålskyddet. Kasta inte bort det, eftersom det kommer att användas igen. Dra av det inre nålskyddet och kasta bort det.

4)



När nålen pekar uppåt trycker du in injektionsknappen så långt det går tills du ser siffran "0" bredvid dosindikatorn. Kontrollera att en liten droppe bildas vid nålspetsen. Om inte en droppe visas ska steg 3 och 4 upprepas.

Rekovellev förfylld penna är nu klar att användas.

5) Ställ in dosen



Vrid dosvredet medurs tills den ordinerade dosen visas bredvid dosindikatorn i doseringsfönstret. Dosen kan höjas eller sänkas utan förlust av läkemedel.

7) Injektion av dos



Rekovellev ska ges genom injektion strax under huden i magregionen. Använd ett nytt injektionsställe för varje injektion för att minska risken för hudreaktioner. Rengör injektionsstället med en spritservett. Ta ett fast grepp om huden och stick in nålen i huden. När nålen förts in placerar du pekfingeret eller tummen på injektionsknappen. **Tryck in injektionsknappen helt. Vänta i 5 sekunder efter att siffran "0" visas i dosindikatorn. Detta säkerställer att du får hela dosen.**

Släpp injektionsknappen och ta sedan långsamt bort nålen från injektionsstället genom att dra ut den direkt ur huden.

6) Uppdelad dos

Du kan behöva mer än en penna för att få den förskrivna dosen. Om du inte kan välja hela dosen betyder det att det inte finns tillräckligt med läkemedel kvar i pennan.

Vid behov kan du ge en injektion med delad dos eller kassera den nuvarande pennan och använda en ny penna för injektionen.

Se bruksanvisningen i förpackningen för mer detaljerad information för beräkning av den uppdelade dosen.

8) Borttagning av nålen



Placera försiktigt det yttre nålskyddet över nålen med ett fast tryck. Skruva av nålen moturs för att ta bort nålen från pennan. Kassera försiktigt den använda nålen.

Ta alltid bort nålen efter varje användning.

Sätt dit pennhylsan

Tryck pennhylsan på pennan som skydd mellan injektionerna.

Kasta använda nålar i en behållare för vassa föremål (farligt avfall) direkt efter användning. Kasta inte behållaren bland hushållsavfallet.