

Rekovele®
follitropin delta

PATIENT- VÄGLEDNING

Injektionsvätska, lösning i förfylld penna



VAD ÄR REKOVELLE®

REKOVELLE® innehåller ett hormon för kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling. REKOVELLE® används för behandling av fertilitetsproblem (infertilitet) hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning (IVF eller ICSI). REKOVELLE® stimulerar äggstockarna att växa och utveckla många äggblåsor, varifrån ägg kan tas ut och befruktas i laboratorium.

HUR ANVÄNDS REKOVELLE®

REKOVELLE® ges som en injektion under huden, vanligtvis på magen. Den förfyllda pennan kan användas för flera injektioner.

Dosen av REKOVELLE® under den första behandlingscykeln beräknas av din läkare på basis av din vikt och ett blodprov som mäter ditt antimülleriska hormon (AMH), vilket är en markör för hur dina äggstockar kommer att reagera på stimuleringen.

Vänd dig till din läkare eller sjuksköterska om du har frågor om din behandling eller om REKOVELLE®. Som alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar. Dock får inte alla patienter biverkningar.

Följande vanliga biverkningar har observerats:

- Huvudvärk
- Illamående
- Ovariellt hyperstimuleringsyndrom (OHSS)*
- Smärta och obehag i bäckenet, inklusive äggstockarna
- Trötthet (utmattning)

*Hormoner som används för att behandla infertilitet, såsom detta läkemedel, kan orsaka en hög aktivitetsnivå i äggstockarna (ovariellt hyperstimuleringsyndrom). Symtomen kan innefatta smärta/ obehag i magen eller uppsvälld mage, illamående, kräkningar, diarré, viktökning och andningssvårigheter. Om du har ett eller flera av dessa symtom ska du omedelbart kontakta läkare.

Läs bipacksedeln i REKOVELLE® förpackningen noggrant innan du börjar ta läkemedlet.



Stegvisa instruktioner om hur du använder REKOVELLE® förfylld penna.

Tvätta händerna med tvål och vatten innan du använder REKOVELLE® förfylld penna.



1

Sätt på nålen

Dra av locket och dra bort skyddsfolien från nålen. Klicka fast nålen så att den sitter fast ordentligt. Använd alltid en ny nål vid varje injektion.



2

Dra av det yttre nålskyddet. Kasta inte bort det, eftersom det kommer att användas igen. Dra av det inre nålskyddet och kasta bort det.



3

Förberedelse

Vrid dosvredet medurs tills en droppsymbol visas bredvid dosindikatorn. Håll pennan med nålen riktad uppåt. Knacka lätt med fingret på ampullhållaren så att eventuella luftbubblor i ampullen stiger till toppen.



4

När nålen pekar uppåt trycker du in injektionsknappen så långt det går tills du ser siffran "0" bredvid dosindikatorn. Kontrollera att en liten droppe bildas vid nålspetsen. Om inte en droppe visas ska steg 3 och 4 upprepas.

REKOVELLE® förfylld penna är nu klar att användas

5



Ställ in dosen

Vrid dosvredet medurs tills den ordinerade dosen visas bredvid dosindikatorn i doseringsfönstret. Dosen kan höjas eller sänkas utan förlust av läkemedel.

6

Delad dos

Du kan behöva mer än en penna för att få den förskrivna dosen. Om du inte kan välja hela dosen betyder det att det inte finns tillräckligt med läkemedel kvar i pennan. Vid behov kan du ge en injektion med delad dos eller kassera den nuvarande pennan och använda en ny penna för injektionen. Se bruksanvisningen i förpackningen för mer detaljerad information för beräkning av den delade dosen.

7



Injektion av dos

REKOVELLE® ska ges genom injektion strax under huden i magregionen. Använd ett nytt injektionsställe för varje injektion för att minska risken för hudreaktioner. Rengör injektionsstället med en spritservett.

Ta ett fast grepp om huden och stick in nålen i huden. När nålen förts in placerar du tummen på injektionsknappen. **Tryck in injektionsknappen helt. Vänta i 5 sekunder efter att siffran "0" visas i dosindikatorn. Detta säkerställer att du får hela dosen.** Släpp injektionsknappen och ta sedan långsamt bort nålen från injektionsstället genom att dra ut den direkt ur huden.

8



Borttagning av nålen


Placera försiktigt det yttre nålskyddet över nålen med ett fast tryck. Skruva av nålen moturs för att ta bort nålen från pennan. Kassera försiktigt den använda nålen.

Ta alltid bort nålen efter varje användning.

Sätt på pennhylsan

Tryck pennhylsan på pennan som skydd mellan injektionerna.

REKOVELLE® PENNANS DELAR

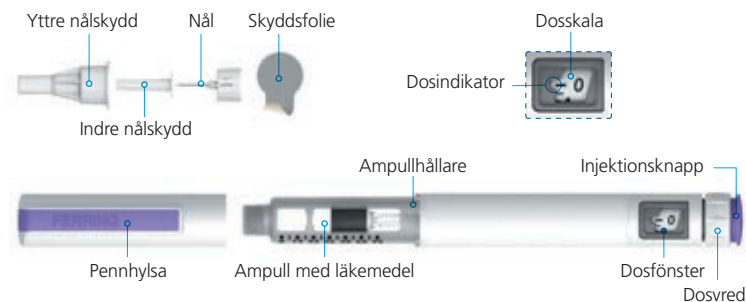

REKOVELLE® förfylld injektionspenna är en penna med dosskala, som kan användas för att ge mer än 1 dos REKOVELLE®.

Pennan finns i tre olika styrkor:

- 12 mikrogram/0,36 ml
- 36 mikrogram/1,08 ml
- 72 mikrogram/2,16 ml

Pennan kan ställas in för att ge doser från 0,33 mikrogram till 20 mikrogram REKOVELLE® i markerade steg om 0,33 mikrogram. REKOVELLE® pennan ska endast användas efter att du instruerats av din vårdpersonal.

FÖRVARING OCH RENGÖRING

- Förvara alltid pennan med pennhylsan på och utan nål.
- Använd inte pennan efter utgångsdatumet (EXP) på pennans etikett.
- Förvara pennan i kylskåp vid 2 – 8 °C före användning.
- Efter första användningen (under användningsperioden) kan pennan förvaras vid högst <math><25\text{ °C}</math> upp till 28 dagar.
- Vid behov kan pennan torkas av med en fuktad trasa.
- Lägg inte pennan i vatten eller annan vätska.
- Se bruksanvisningen i förpackningen för mer detaljerad information om förvaring.



skanna QR-koden och se instruktionsvideon för REKOVELLE®



FERRING LÄÄKKEET OY
BERTEL JUNGS PLATS 5, 02600 ESBO